


MANIPULAT**O.R.**™

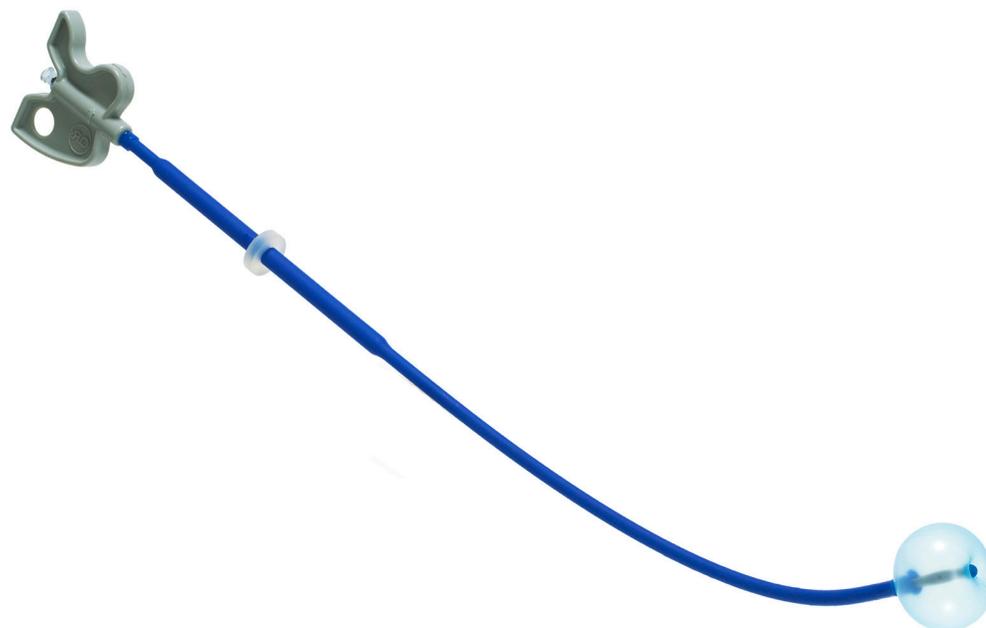


Pour exposer et contrôler l'utérus intelligemment

Le **ManipulatOR™** permet une manipulation utérine efficace et sécurisante lors d'une chirurgie laparoscopique ou robotique du bassin. Ce dispositif à usage unique peut être utilisé à des fins de diagnostic.

Il permet une exposition et un contrôle de l'utérus ainsi que l'accès à l'anatomie pelvienne. Il peut être utilisé pour créer la tension nécessaire sur les tissus afin de sectionner les ligaments.

Le **ManipulatOR™** comporte un ballon gonflable de 20 cc et un axe anatomiquement courbé qui permettent une manipulation douce réduisant le risque de perforation.

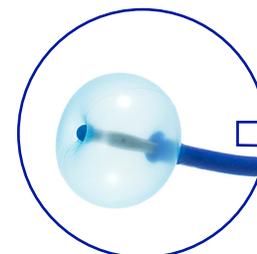

Ballon 20cc



Poignée ergonomique


CONTACTEZ NOUS :

KEBOMED France
4, rue du Docteur Pravaz
F-69110 SAINTE FOY LES LYON
Tel : 04 78 59 54 93
Fax : 04 78 59 89 78
info@kebomed.fr
www.kebomed.fr

Simple, sécurisant et économique

- Ballon gonflable de 20cc stabilise le **ManipulatOR™** in situ et permet une manipulation douce réduisant le risque de perforation.
- Vanne 2 voies assurant un gonflage et un dégonflage aisés du ballon intra-utérin.
- Axe courbe du **ManipulatOR™** optimise l'accès chirurgical et permet la mobilisation de l'utérus (antéversion, rétroversion et mouvement latéral).
- Design unique de la poignée donnant aux chirurgiens la direction et le contrôle de la position de l'utérus, tant visuellement que par la sensation quand la vision directe n'est pas possible, à cause du drapage par exemple.
- Facile à installer, pas de pièces mobiles.
- Absence de latex.

Le **ManipulatOR™** peut être utilisé conjointement avec le McCartney Tube™.

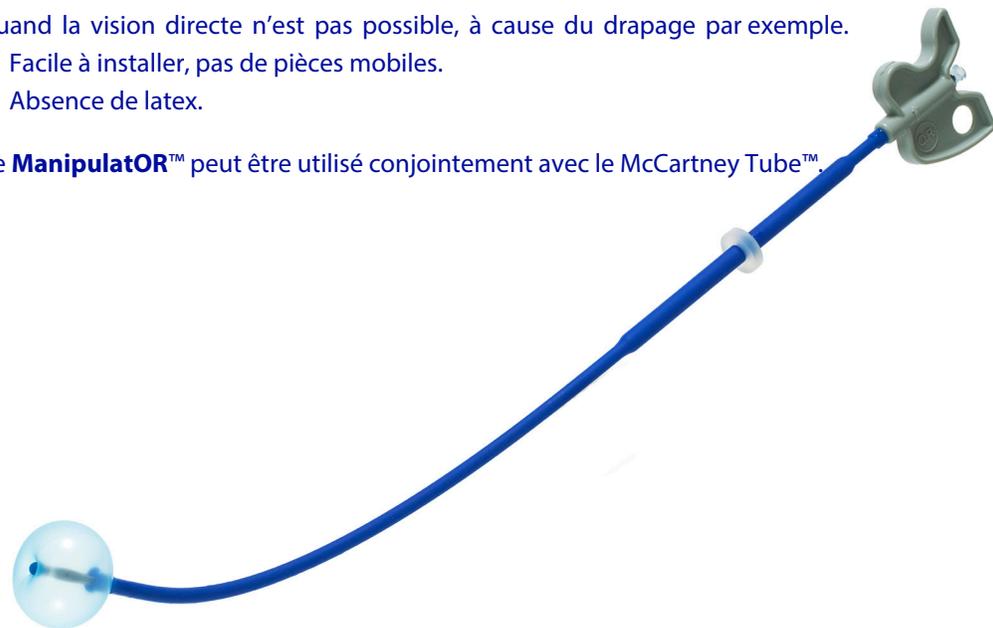

Référence du produit

REF/Order #	Description	Conditionnement
UM-TV	ManipulatOR™ – manipulateur utérin	Boîte de 5, stérile

QUI SOMMES-NOUS ?

La société O.R. développe, fournit et commercialise des dispositifs chirurgicaux innovants de haute qualité, des produits de niche aux instruments chirurgicaux exclusifs, pour la chirurgie mini-invasive et ouverte.

En collaboration avec des chirurgiens, des techniciens cliniques et des infirmières du monde entier, nous identifions les besoins chirurgicaux et les concrétisons en produits efficaces et sûrs comme le **ManipulatOR™**.

Mandataire Européen : KEBOMED
 Classe du dispositif : IIa
 Nom & numéro de l'organisme certifié : Australian Government (0805)

Distributeur : KEBOMED
 4, rue Docteur Pravaz
 F-69110 SAINTE FOY LES LYON
 Tel : 04 78 59 54 93 - Fax : 04 78 59 89 78
 info@kebomed.fr - www.kebomed.fr

CONTACTEZ NOUS :

KEBOMED France
 4, rue du Docteur Pravaz
 F-69110 SAINTE FOY LES LYON
 Tel : 04 78 59 54 93
 Fax : 04 78 59 89 78
 info@kebomed.fr
 www.kebomed.fr