




Innovation in Gynaecology

# LiNA Gold Loop™

*Hystérectomie supracervicale  
laparoscopique et myomectomie*



*- sectionne l'utérus en  
5 secondes!*

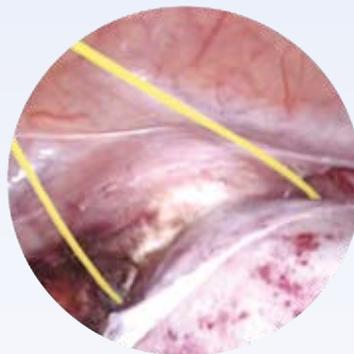


## sécurité

### Sectionnement sûr et précis

Le dispositif LiNA Gold Loop™ offre un champ de vision unique et complet pendant le positionnement, le sectionnement et la coagulation.

- La surface reste propre et coagulée
- Un fil flexible coloré optimise la visibilité sur le moniteur

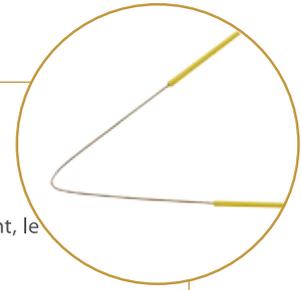

## polyvalence

### Réduction du temps de la procédure

Le dispositif LiNA Gold Loop™ est une anse monopolaire sûre et efficace permettant de sectionner l'utérus pendant une hystérectomie supracervicale laparoscopique (HSL). Par ailleurs, l'anse LiNA Gold Loop™ est le choix idéal pour l'exérèse de myomes extrautérins (sousséreux ou pédiculés).

- Sectionnement propre et efficace à chaque fois

En règle générale, lors d'une hystérectomie supracervicale laparoscopique, l'utérus est sectionné audessus du col de l'utérus à l'aide d'instruments de découpe et de coagulation traditionnels. Le sectionnement de l'utérus prend généralement entre 10 et 30 minutes en raison des difficultés de sectionnement à proximité du col.


L'anse unique LiNA Gold Loop™ a été spécialement conçue pour réaliser ce même sectionnement de l'utérus en environ 5 secondes! L'anse monopolaire effectue un sectionnement sûr et efficace de l'utérus en laissant la surface du col propre et coagulée. Un résultat garanti à chaque fois.

- Sectionnement et coagulation en une seule étape

En réglant le générateur sur le mode mixte, soit environ 20 % coagulation et 80 % sectionnement, à 100-130 watts, l'anse LiNA Gold Loop™ exécute ces actions de manière optimale pendant l'intervention et élimine donc le besoin de recourir à une postcoagulation de la surface.

- Prête à fonctionner en toute facilité

En faisant coulisser la poignée vers l'avant, l'anse s'ouvre et est prête à l'emploi. La canule rigide autorise une maniabilité optimale.

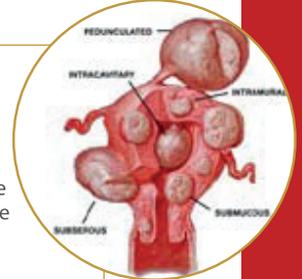

## fonctionnalité

### Anse monopolaire unique pour hystérectomie supracervicale laparoscopique et myomectomie

- 3 tailles d'anse: (160 mm x 80 mm), (200 mm x 100 mm) et (240 mm x 120 mm)
- L'anse LiNA Gold Loop™ est proposée avec des connecteurs de 4 mm et 8 mm, adaptables à n'importe quelle unité électrochirurgicale

Informations de commande:

LiNA Gold Loop™ **CE 0459**

RÉF.	Produit	Emballage
EL-160-4	LiNA Gold Loop™ - Anse endoscopique monopolaire de 5 mm pour hystérectomie supracervicale laparoscopique et myomectomie. Dimensions de l'anse: 160 mm x 80 mm. Fournie avec câble de 3 mètres et connecteur de 4 mm pour unité électrochirurgicale.	Boîte de 6, stériles, usage unique
EL-160-8	LiNA Gold Loop™ - Anse endoscopique monopolaire de 5 mm pour hystérectomie supracervicale laparoscopique et myomectomie. Dimensions de l'anse: 160 mm x 80 mm. Fournie avec câble de 3 mètres et connecteur de 8 mm pour unité électrochirurgicale.	Boîte de 6, stériles, usage unique
EL-200-4	LiNA Gold Loop™ - Anse endoscopique monopolaire de 5 mm pour hystérectomie supracervicale laparoscopique et myomectomie. Dimensions de l'anse: 200 mm x 100 mm. Fournie avec câble de 3 mètres et connecteur de 4 mm pour unité électrochirurgicale.	Boîte de 6, stériles, usage unique
EL-200-8	LiNA Gold Loop™ - Anse endoscopique monopolaire de 5 mm pour hystérectomie supracervicale laparoscopique et myomectomie. Dimensions de l'anse: 200 mm x 100 mm. Fournie avec câble de 3 mètres et connecteur de 8 mm pour unité électrochirurgicale.	Boîte de 6, stériles, usage unique
EL-240-4	LiNA Gold Loop™ - Anse endoscopique monopolaire de 5 mm pour hystérectomie supracervicale laparoscopique et myomectomie. Dimensions de l'anse: 240 mm x 120 mm. Fournie avec câble de 3 mètres et connecteur de 4 mm pour unité électrochirurgicale.	Boîte de 6, stériles, usage unique
EL-240-8	LiNA Gold Loop™ - Anse endoscopique monopolaire de 5 mm pour hystérectomie supracervicale laparoscopique et myomectomie. Dimensions de l'anse: 240 mm x 120 mm. Fournie avec câble de 3 mètres et connecteur de 8 mm pour unité électrochirurgicale.	Boîte de 6, stériles, usage unique

Distributeur:  
**KEBOMED**

• 4 rue du Docteur Pravaz  
69110 SAINT-FOY LÈS LYON  
France

• Tel.: +33 (0)4 78 59 54 93  
Fax: +33 (0)4 78 59 89 78  
info@kebomed.fr

• www.kebomed.fr



Fabricant:  
**LiNA Medical ApS**

• Formervangen 5  
DK-2600 Glostrup  
Denmark

• Tel.: +45 43 29 66 66  
Fax: +45 43 29 66 99  
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com  
CVR: 10054974