


LiNA Bipolar Loop™

*Hystérectomie supracervicale par laparoscopie
et ablation de myomes sous-séreux pédiculés*

La section en quelques secondes

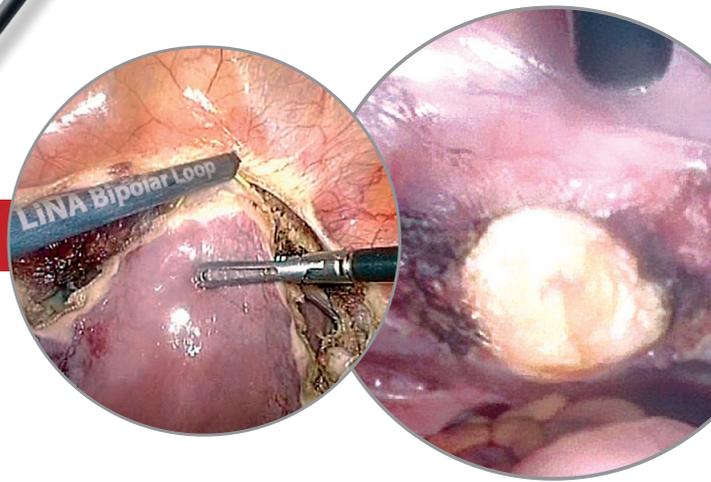

LiNA ®

LiNA Bipolar Loop™

Hystérectomie supracervicale par laparoscopie
et ablation de myomes sous-séreux pédiculés

Sécurisation du geste.

Energie réduite, effet optimal.

La technologie bipolaire offre une action de coupe immédiate et une sécurité renforcée en utilisant une puissance de seulement 55 à 70 watts. Ne nécessite pas de plaque neutre.

L'extrémité protectrice en céramique améliore la visualisation et assure une précision optimale du positionnement de la boucle.

L'extrémité protectrice en céramique, associée à l'isolation en or, permet de limiter l'action de coupe aux tissus situés entre les deux électrodes, renforçant ainsi la sécurité d'utilisation.

Rapide. Une coupe nette en quelques secondes.

Durée de section du col utérin réduite de plusieurs minutes au moins.



La coupe et la coagulation réalisées en une seule étape permettent une hémostase nette, ce qui réduit la nécessité de coagulation additionnelle de la partie restante du col, ou le pédicule.

Simplification du geste.

Ne nécessite pas de générateur spécifique.

Le LiNA Bipolar Loop™ est compatible avec les appareils électrochirurgicaux standards, ce qui permet une configuration simplifiée.

Câble de 3 mètres avec fiche bipolaire mâle standard de 4 mm à 2 broches ou connecteur EURO.

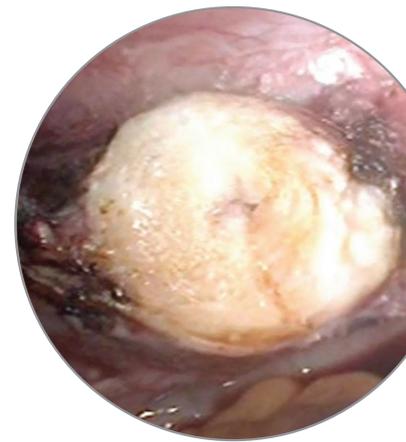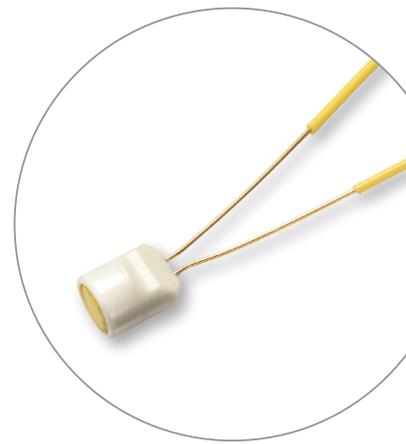

Informations de commande :

LiNA Bipolar Loop™

CE
0459

Code produit	Description	Quantité
BL-160	LiNA Bipolar Loop™ – Boucle bipolaire endoscopique pour hystérectomie supracervicale et myomectomie. Petite boucle – 160 mm x 80 mm. Fiche à 2 broches. Stérile, à usage unique.	Boîte de 6 pièces
BL-200	LiNA Bipolar Loop™ – Boucle bipolaire endoscopique pour hystérectomie supracervicale et myomectomie. Grande boucle – 200 mm x 100 mm. Fiche à 2 broches. Stérile, à usage unique.	Boîte de 6 pièces
BL-240	LiNA Bipolar Loop™ – Boucle bipolaire endoscopique pour hystérectomie supracervicale et myomectomie. Très grande boucle – 240 mm x 120 mm. Fiche à 2 broches. Stérile, à usage unique.	Boîte de 6 pièces
BL-160-E	LiNA Bipolar Loop™ – Boucle bipolaire endoscopique pour hystérectomie supracervicale et myomectomie. Petite boucle – 160 mm x 80 mm. Connecteur EURO. Stérile, à usage unique.	Boîte de 6 pièces
BL-200-E	LiNA Bipolar Loop™ – Boucle bipolaire endoscopique pour hystérectomie supracervicale et myomectomie. Grande boucle – 200 mm x 100 mm. Connecteur EURO. Stérile, à usage unique.	Boîte de 6 pièces
BL-240-E	LiNA Bipolar Loop™ – Boucle bipolaire endoscopique pour hystérectomie supracervicale et myomectomie. Très grande boucle – 240 mm x 120 mm. Connecteur EURO. Stérile, à usage unique.	Boîte de 6 pièces

©2020 LiNA Medical ApS. Tous droits réservés.

LiNA est une marque déposée de LiNA Medical dans l'UE, aux États-Unis et en Chine.

Document réservé à l'usage des Professionnels de Santé.

Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux.

Distributeur :

KeBomed France

● 300 rue du Noir Debout
Parc d'activité de Croisette
59242 Cappel en Pévèle
France

● Tel : 04 78 59 54 93
Fax : 04 78 59 89 78
info@kebomed.fr
www.kebomed.fr

● Classe du dispositif : IIb
Nom et numéro de l'organisme notifié :
LNE/G-MED # 0459

Fabricant :

LiNA Medical ApS

● Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Denmark

● Tel: +45 43 29 66 66
Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com

● www.lina-medical.com
CVR: 10054974

EN ISO 13485:2016

Système de gestion de la qualité

