

LiNA PowerBlade™

Pince multifonctions à usage unique pour coagulation et incision/section bipolaires



LiNA PowerBlade™



Fonctionnalité. Une incision/section propre et précise

L'électrode bipolaire/lame ne s'é mouss e pas

La conception brevetée permet une incision/section bipolaire des tissus. L'incision/section s'effectue par énergie bipolaire et **non par action mécanique** d'une lame

S'utilise sur tous les générateurs standards d'électrochirurgie bipolaire


Large choix pour la taille, la longueur et la géométrie des mâchoires



5 mm et 10 mm – Mâchoires droites



5 mm – Mâchoires courbes

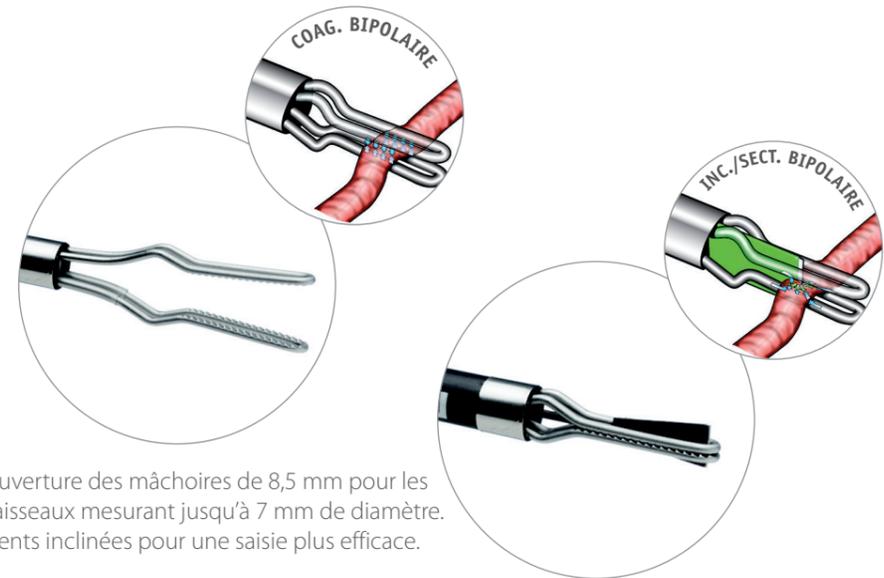

Ouverture des mâchoires de 8,5 mm pour les vaisseaux mesurant jusqu'à 7 mm de diamètre. Dents inclinées pour une saisie plus efficace.

Électrode/lame pour une incision/section bipolaire.

Polyvalence. LiNA PowerBlade™ s'utilise avec tous les générateurs standards d'électrochirurgie bipolaire. Aucun investissement supplémentaire n'est nécessaire pour utiliser LiNA PowerBlade™

Large gamme de fonctions

LiNA PowerBlade™ est une pince bipolaire utilisant une technologie brevetée de coagulation et incision/section des tissus pour les procédures laparoscopiques. Instrument « tout en un », LiNA PowerBlade™ est idéal pour de nombreuses procédures longues et complexes :

- Saisir
- Disséquer
- Coaguler
- Inciser et sectionner

Sécurité. L'électrode/lame est un système d'incision/section bipolaire unique

Avancer l'électrode/lame pour inciser/sectionner et appuyer simultanément sur la pédale pour activer le courant bipolaire au niveau des mâchoires

Le courant électrochirurgical passe dans les tissus entre l'électrode/lame d'incision/section et les mâchoires


L'électrode d'incision/section électrochirurgicale bipolaire réduit l'hémorragie par rapport à un instrument équipé d'une lame conventionnelle



LiNA PowerBlade™

Disponibles avec trois types de connecteurs :

- 1) Connecteur EURO
- 2) 2 fiches de 4 mm (banane)
- 3) 2 fiches de 4 mm avec distance fixe de 29 mm

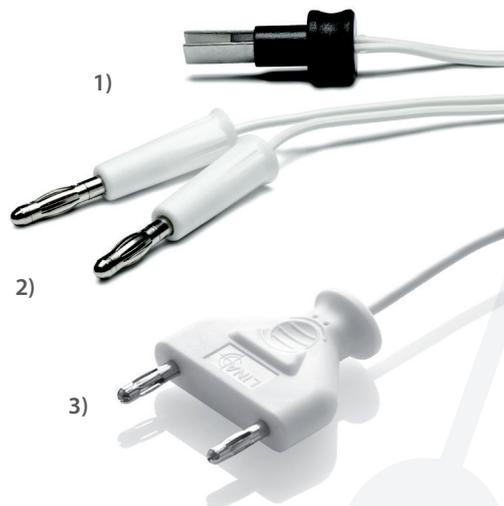

Informations de commande :

LiNA PowerBlade™

CE
0459

Code produit	LiNA PowerBlade™ - Exclusivement pour usage unique - Emballage individuel - Stérile	Emballage
5005-E	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 5,4 mm, longueur 330 mm, câble de 3 m, connecteur EURO	Boîte de 5
5005-E-160	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 5,4 mm, longueur 185 mm, câble de 3 m, connecteur EURO	Boîte de 5
5005-E-420	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 5,4 mm, longueur 445 mm, câble de 3 m, connecteur EURO	Boîte de 5
5010-E	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 10 mm, longueur 330 mm, câble de 3 m, connecteur EURO	Boîte de 5
5010-E-160	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 10 mm, longueur 185 mm, câble de 3 m, connecteur EURO	Boîte de 5
5005-E-C	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires courbes, Ø 5,4 mm, longueur 330 mm, câble de 3 m, connecteur EURO	Boîte de 5
5005-E-C-160	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires courbes, Ø 5,4 mm, longueur 185 mm, câble de 3 m, connecteur EURO	Boîte de 5
5005-E-C-420	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires courbes, Ø 5,4 mm, longueur 445 mm, câble de 3 m, connecteur EURO	Boîte de 5
5005	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 5,4 mm, longueur 330 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm	Boîte de 5
5005-160	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 5,4 mm, longueur 185 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm	Boîte de 5
5005-420	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 5,4 mm, longueur 445 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm	Boîte de 5
5010	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 10 mm, longueur 330 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm	Boîte de 5
5010-160	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 10 mm, longueur 185 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm	Boîte de 5
5005-C	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires courbes, Ø 5,4 mm, longueur 330 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm	Boîte de 5
5005-C-160	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires courbes, Ø 5,4 mm, longueur 185 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm	Boîte de 5
5005-C-420	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires courbes, Ø 5,4 mm, longueur 445 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm	Boîte de 5
5005-Y	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 5,4 mm, longueur 330 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm avec distance fixe de 29 mm	Boîte de 5
5005-Y-160	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 5,4 mm, longueur 185 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm avec distance fixe de 29 mm	Boîte de 5
5005-Y-420	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 5,4 mm, longueur 445 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm avec distance fixe de 29 mm	Boîte de 5
5010-Y	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 10 mm, longueur 330 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm avec distance fixe de 29 mm	Boîte de 5
5010-Y-160	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires droites, Ø 10 mm, longueur 185 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm avec distance fixe de 29 mm	Boîte de 5
5005-Y-C	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires courbes, Ø 5,4 mm, longueur 330 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm avec distance fixe de 29 mm	Boîte de 5
5005-Y-C-160	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires courbes, Ø 5,4 mm, longueur 185 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm avec distance fixe de 29 mm	Boîte de 5
5005-Y-C-420	Pince pour coagulation et incision/section bipolaires, mâchoires courbes, Ø 5,4 mm, longueur 445 mm, câble de 3 m, 2 x fiches de 4 mm avec distance fixe de 29 mm	Boîte de 5

©2021 LiNA Medical ApS. Tous droits réservés.

LiNA est une marque déposée de LiNA Medical dans l'UE, aux États-Unis et en Chine.

Distributeur :

Kebomed France

• 300 rue du Noir Debout,
Parc d'activité de Croisette,
59242 Cappelle en Pévèle,
France

Tel.: 04 78 59 54 93
Fax: 04 78 59 89 78
info@kebomed.fr
www.kebomed.fr

• Classe du dispositif : IIb
Nom et numéro de l'organisme notifié :
LNE / G-MED # 0459

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

Avant toute utilisation, consulter le mode d'emploi fourni avec chaque dispositif médical.

Fabricant :

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Denmark

• Tel.: +45 43 29 66 66
Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com
CVR: 10054974

Système de gestion de la qualité
EN ISO13485:2016

